



Austausch Cerumenfilter


AUSTAUSCHEN IN 10 EINFACHEN SCHRITTEN

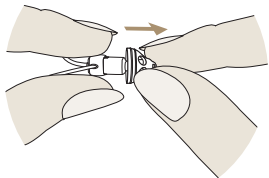


1. Halten Sie mit einer Hand den Lautsprecher und ziehen Sie mit der anderen Hand das Ohrpass-Stück vorsichtig ab.

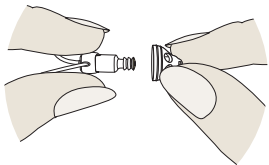


2. Ziehen Sie das Ohrpass-Stück vorsichtig ab.

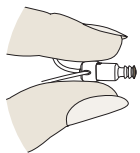


3. Reinigen Sie den Lautsprecher mit einem fuselfreien Tuch. Mit Reinigungsspray auf dem Tuch gelingt das einwandfrei.

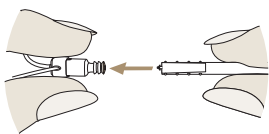


4. Setzen Sie den Stift des Austauschwerkzeugs bis zum Anschlag in den im Lautsprecher angebrachten Cerumenschutz ein.

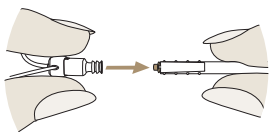


5. Ziehen Sie den gebrauchten Cerumenschutz vorsichtig und gerade aus dem Lautsprecher heraus.

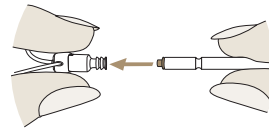


6. Um einen neuen Cerumenschutzfilter anzubringen, drehen Sie das Austauschwerkzeug um und stecken den Einführstift mit dem neuen Cerumenschutz vorsichtig in die Öffnung des Lautsprechers.

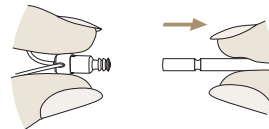


7. Ziehen Sie das Werkzeug gerade heraus. Der neue Cerumenschutz verbleibt im Lautsprecher.

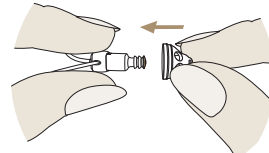

8. Bringen Sie nun das Ohrpass-Stück am Lautsprecher an. Den gebrauchten Filter samt Werkzeug können Sie entsorgen.

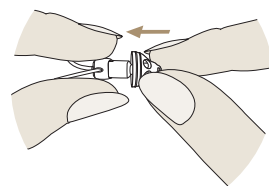

9. Bringen Sie das Ohrpass-Stück über dem Schallaustritt des Lautsprechers an.

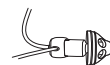

10. Das Ohrpass-Stück sollte fest am Lautsprecher angebracht sein.